



ESTERILIZADOR DE ALTA TEMPERATURA

ARTÍCULO NO. SM-360B

INSTRUCCIONES



Tensión nominal: 220V-240V 50Hz

Potencia: 300W

Es bien sabido que la temperatura alta puede matar las bacterias y los virus adheridos al artículo. Nuestro SM-360B puede alcanzar una temperatura máxima de 230 °C. Este dispositivo es muy utilizado en laboratorios, servicios de catering y salones de belleza.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos a través de contact@lifebasis.com

MÉTODO DE OPERACIÓN


1. Conecte la fuente de alimentación pareo que le proporcionamos.
 2. Coloque su instrumento a esterilizar en la bandeja y cierre la tapa.
 3. Presione el interruptor de encendido (se recomienda asegurarse de que su dedo esté en pleno contacto con el botón), presione el dial y se encenderá la luz roja de temperatura, luego gírela para seleccionar la temperatura, presione nuevamente para seleccionar la hora y se encenderá la luz roja de tiempo. Presione nuevamente para confirmar el modo seleccionado. Luego presione el interruptor de encendido nuevamente. El tiempo cuenta atrás y finaliza automáticamente y la luz roja intermitente se apaga. Presione el interruptor de encendido durante 3-5 segundos para apagar la máquina. En general, todos los instrumentos y artículos se pueden esterilizar completamente en 15 minutos a 125°C.
 4. Función de Control del Panel.
 1. Interruptor de encendido (3 segundos);
 2. Presione ()Perilla de Temperatura/Tiempo/Configuración/Ajuste;
 3. Luz indicadora de funcionamiento de calefacción;
 4. Luz indicadora de tiempo de trabajo;
 5. Visualización de temperatura;
 6. Visualización de la hora;



5. Desenchufe el enchufe después de cada uso.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- Mantenga el dispositivo alejado de los niños.
 - Despues de la esterilización, enganche el anillo en la bandeja y retírelo del dispositivo.
 - ¡NO TOQUE LA BANDEJA CALIENTE CON LAS MANOS!

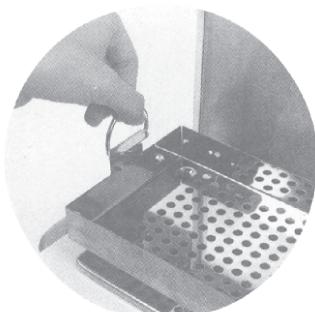



ELIMINACIÓN Y RECICLAJE:

Debe deshacerse de la Esterilizador dealta temperatura correctamente de acuerdo con las leyes y normativas locales. Dado que esta máquina contiene componentes electrónicos, debe desecharse y separarse de la basura doméstica. Cuando llegue al final de su vida útil, póngase en contacto con las autoridades locales para informarse sobre las opciones de eliminación y reciclaje. Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor, recuerde respetar la normativa local y desechar el equipo eléctrico que no funcione en un centro de eliminación de residuos adecuado.



SMALTIMENTO E RICICLAGGIO:

Il Sterilizzatore ad aria calda deve essere smaltito correttamente secondo le leggi e le normative locali. Poiché questo apparecchio contiene componenti elettronici, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Una volta terminato il suo ciclo di vita, contattare le autorità locali per conoscere le possibilità di smaltimento e riciclaggio. Ricordarsi di rispettare le norme locali e di smaltire le apparecchiature elettriche non funzionanti presso un centro di smaltimento appropriato.