



Stérilisateur à Air Chaud

RÉF. PRODUIT SM-360B

INSTRUCTIONS





Tension Nominale : 220V-240V 50Hz


Puissance : 300W

Il est bien connu que la haute température peut efficacement éliminer les bactéries et les virus qui peuvent être présents sur divers objets. Notre appareil SM-360B peut atteindre une température maximale de 230 degrés Celsius. Cela en fait un outil polyvalent, largement utilisé dans les laboratoires, les services de restauration et les salons de beauté.

Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse **contact@lifebasis.com**

MÉTHODE D'UTILISATION

1. Branchez la source d'alimentation fournie.
2. Placez les articles à stériliser sur le plateau et fermez le couvercle.
3. Avant d'appuyer sur le bouton de démarrage, assurez-vous que votre doigt est en contact complet avec l'interrupteur. Appuyez maintenant et maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant 3 secondes. Utilisez le bouton pour régler la température et la durée souhaitées. Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage pour confirmer le mode sélectionné. Le minuteur se décompte automatiquement, et le voyant rouge s'éteint lorsque la stérilisation est terminée. Pour éteindre complètement la machine, appuyez et maintenez le bouton tactile de l'interrupteur enfoncé pendant 3 à 5 secondes.
4. Fonction de Contrôle du Panneau
 1. Bouton de démarrage (appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes).
 2. Bouton de ( ) Température/Durée/Paramètres/Réglage (appuyez pour sélectionner).
 3. Voyant de fonctionnement de réchauffement.
 4. Témoin de fonctionnement du minuteur.
 5. Affichage de la température.
 6. Affichage de la durée.

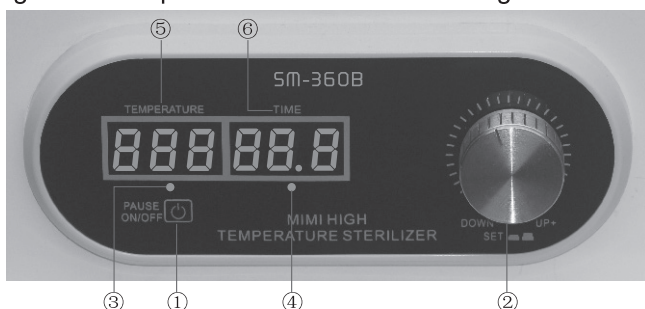

5. Débranchez l'alimentation après chaque utilisation.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Après la stérilisation, utilisez l'anneau fourni pour accrocher le plateau, puis retirez-le de l'appareil.
- NE TOUCHEZ PAS LE PLATEAU CHAUD AVEC VOS MAINS!

