



LifeBasis

Heissluftsterilisator

ARTIKEL NR. SM-360B

INSTRUCTIONS



Nominalspannung: 220V-240V 50Hz.


Leistung: 300W

Es ist bekannt, dass hohe Temperaturen Bakterien und Viren, die sich auf verschiedenen Gegenständen befinden können, wirksam abtöten. Unser SM-360B kann eine Höchsttemperatur von 230 Grad Celsius erreichen. Das macht es zu einem vielseitigen Gerät für eine breite Palette von Anwendungen in Labors, in der Gastronomie und in Schönheitssalons.

Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns per **contact@lifebasis.com**

VERWENDUNGSMETHODE

1. Schließen Sie den Stecker an.
2. Legen Sie die zu sterilisierenden Gegenstände auf das Tablett und schließen Sie den Deckel.
3. Drücken Sie den ON/OFF Schalter (es wird empfohlen, dass Ihr Finger den Knopf vollständig berührt), drücken Sie den Drehknopf und das rote Licht für die Temperatur leuchtet auf, drehen Sie dann, um die Temperatur auszuwählen, drücken Sie erneut, um die Zeit auszuwählen und das rote Licht für die Zeit leuchtet auf. Drücken Sie erneut, um den gewählten Modus zu bestätigen. Drücken Sie dann erneut den ON/OFF Schalter. Die Zeit wird heruntergezählt und endet automatisch und das rote Blinklicht erlischt. Drücken Sie den ON/OFF Schalter 3-5s drücken, um das Gerät auszuschalten. Im Allgemeinen können alle Instrumente und Güter können in 15 Minuten bei 125°C vollständig sterilisiert und desinfiziert werden.
4. Bedienfeldfunktionen
 1. ON/OFF Schalter (3 Sekunden);
 2. Tasten zum Einstellen: Nach unten drücken (■ ■) Temperatur/Zeit Einstellungen;
 3. Betriebslicht für Aufwärmbetrieb;
 5. Anzeige der Temperatur;
 4. Betriebslicht für den Timer;
 6. Zeitanzeige.

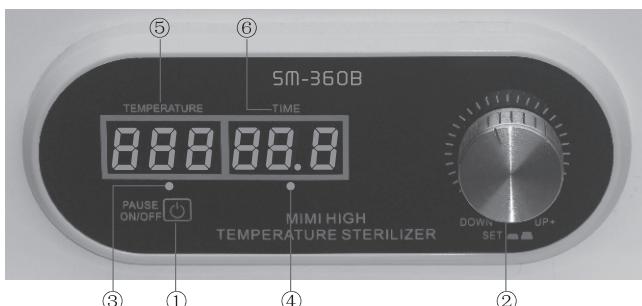

5. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.

SICHERHEITSWARNUNG

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie nach der Sterilisation den mitgelieferten Ring, um das Tablett aufzuhängen, und nehmen Sie es dann aus dem Gerät heraus.
- **BERÜHREN SIE DAS HEISSE TABLETT NICHT MIT DEN HÄNDEN!**

